

Descascaradora Eléctrica de Arroz Avanzada

Modelo TR250



Las Mediciones del mañana, Hoy!
1-714-974-8837

Descascaradora Eléctrica de Arroz Avanzada

Descascara Automáticamente Pequeñas Muestras de Arroz

Este instrumento de fácil uso descascara pequeñas muestras de arroz para proporcionarle arroz cargo. Este proceso es utilizado para generar mediciones de humedad así también como muchas aplicaciones únicas R&D.


Fácil Operación – Resultados de Nivel Mundial

Para descascarar una muestra, simplemente vierta el arroz paddy en la tolva del TR250. Cierre la tolva y presione el botón de encendido. Mientras se descascara el arroz, el arroz cargo es automáticamente movido a una cajilla separada donde puede ser removido para la medición de humedad. La cáscara puede ser fácilmente desechada.

La operación es muy limpia dado que la prueba es completamente cerrada. Cada muestra es de aproximadamente 20grs. Desde que la preparación simple manual se ha eliminado usando el TR250 se ha mejorado la eficiencia en el testeo de arroz en laboratorio o la elevación de granos al volverse más fácil la medición de una variedad de humedades. Además, los resultados de las pruebas son más estables por las mejoras en la consistencia del arroz cargo.

Otros Instrumentos Kett de Testeo y Procesamiento

El TR250 es el último diseño de Kett, considerado el líder mundial en mediciones de calidad en arroz. Fabricamos una amplia gama de instrumentos y tecnologías auxiliares. Algunos de nuestros productos más populares son mostrados debajo.

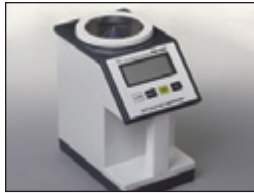

• Medidor de Humedad Portátil PM450



• Medidor de Humedad Avanzado PM650



• Medidor de Humedad Portátil Riceter



• Analizador Instantáneo de Composición de Arroz AN820



• Medidor de Blancura de Arroz C600

Hechos para Durar – Resultados de Calidad en Laboratorio Durabilidad en la Producción en Línea

Kett se mantiene detrás de los sistemas TR250 con una **Garantía de fabricación de un Año completo en Cuidados de piezas**, mano de obra y cumplimiento de las especificaciones. La solvencia y confiabilidad Kett le permite enfocarse productivamente en el mejoramiento de la calidad de sus productos sin perder tiempo calibrando y verificando nuestras mediciones. Kett es reconocida a nivel mundial como el líder mundial en instrumentos de medición de granos. Con más de 65 años de diseños y fabricación de excelencia, el TR250, como todos los instrumentos Kett, es el estándar en el cual los otros son juzgados.



• Analizador de Arroz TX200



• Analizador de Calidad de Arroz RN300



• Clasificadora de Arroz Automatizado RN600



• Descascaradora de Arroz Portátil TR130



• Pulidora de arroz Pearlest

La Medición del Mañana, Hoy!

Además de nuestro TR250 único, Kett fabrica cerca de 200 diferentes instrumentos. Disponible para portátiles de mano, escritorio de laboratorio o aplicaciones de procedimientos en línea, si usted precisa mediciones, le ofrecemos soluciones... Hoy! Si usted precisa medir componentes orgánicos - - de forma precisa, rápida y simple, desea hacer una orden o requiere de una guía adicional en la selección del modelo, por favor llame gratis a Kett!

Especificaciones

Modelo	TR250
Principio	Molienda, Descascarado
Volumen de Muestra	Aproximadamente 20g
Producto	Arroz Paddy (a Arroz Cargo)
Rango de Humedad	12-18%
Tiempo de Descascarado	Aproximadamente 15 segundos
Potencia	100VAC - 50/60 Hz
Peso (kg) (Neto/Embarque)	1.8/3
Dimensiones (mm)	205(W)x130(H)x130(D)
Garantía	Un año de Total Cuidad Acuerdos de Mantenimiento Disponibles

1-800-GET-KETT



PMB 504, 17853 Santiago Boulevard,
Suite 107, Villa Park, CA 92861
714-974-8837 • 714-974-8877 (FAX)

1-800-438-5388

www.Kett.com

Sales, Support, Service

ISO 9001

